



Ref.GR0405A

GRUA QUICK RAISER II

- Para elevar y movilizar al paciente en posición de pie, para cambio de pañales, vestir, llevar al WC, cambio de silla a silla.
- Pequeña y de fácil manejo.
- Es eléctrica accionada mediante mando con cable. El mando cuenta con cuatro funciones, dos para subir y bajar y dos para abrir y cerrar las patas.
- El mástil de la grúa está inclinado para imitar el movimiento natural del cuerpo al incorporarse.
- El paciente no sólo está siendo elevado, sino también empujado hacia delante por la zona lumbar mediante un arnés especial.
- Patas de apertura eléctrica de 36 cm hasta 120 cm
- Arnés ancho con cierre a cintura y antideslizante en su interior, por lo que no sufre daño bajo las axilas.
- La plataforma para apoyo de pies es plana y segura, con protección antideslizante.
- Los apoyos de rodilla se pueden regular en altura, en anchura y en inclinación para adaptarse a cada paciente. Llevan cinturón de seguridad para sujetar las piernas por detrás.
- Asideros ergonómicos. El manillar de empuje, graduable en altura, se adapta a la altura de cada cuidador.
- Dos tipos de percha: en forma de "V"(equipamiento estándar) y en forma de "U"(opcional).
- Sistema único de rodamiento con ruedas adicionales que aseguran una mejor distribución del peso y estabilidad.





Ref.GR0405A

GRUA QUICK RAISER II

- Patas de 10 cm de altura desde el suelo, que pasan por todos los sitios y encajan exactamente con la taza del W.C.
- Parada de emergencia mediante botón rojo en el chasis.
- Bajada de emergencia eléctrica.
- Bajada de emergencia manual.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Capacidad de carga 160 Kg
- Indicador acústico y luminoso de batería baja.
- Indicador acústico y luminoso de control de mantenimiento.
- Se suministra con cincha, batería y cargador de batería.
- Cumple todas las normativas CE
 - o ISO10535 Grúas para el traslado de las personas con discapacidad
 - Requisitos y métodos de ensayo
 - o ISO 14971 Equipos médicos – Análisis de riesgo






Ref.GR0405A

GRUA QUICK RAISER II

Medidas en mm QR II :

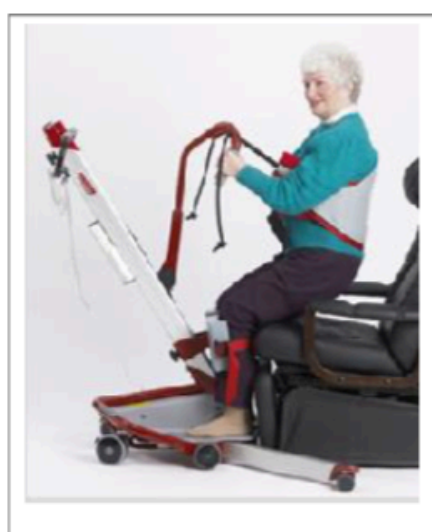

Percha en "V" (estándar)



Percha en "U" (opcional)

